



VITEK2 COMPACT BCI 设置

- 在 V2C application 主界面点击设置图标，在下拉菜单中选择“BCI Configuration”，如图所示。

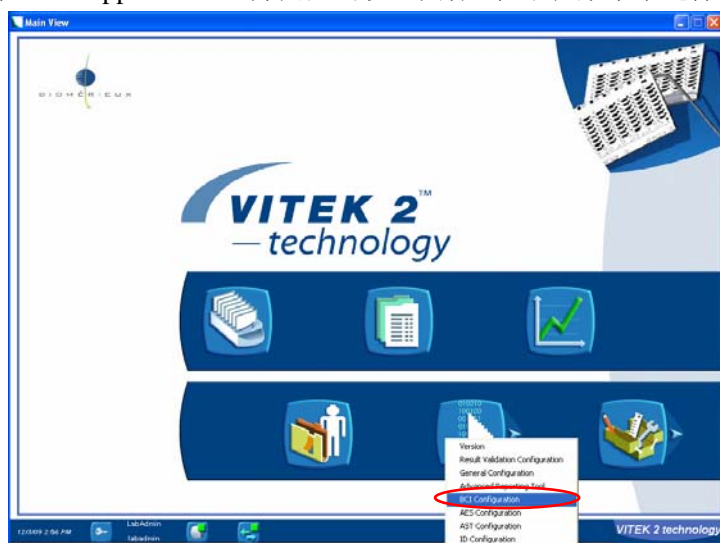

- 点击开锁图标，请按照下列界面进行 BCI 的设置。

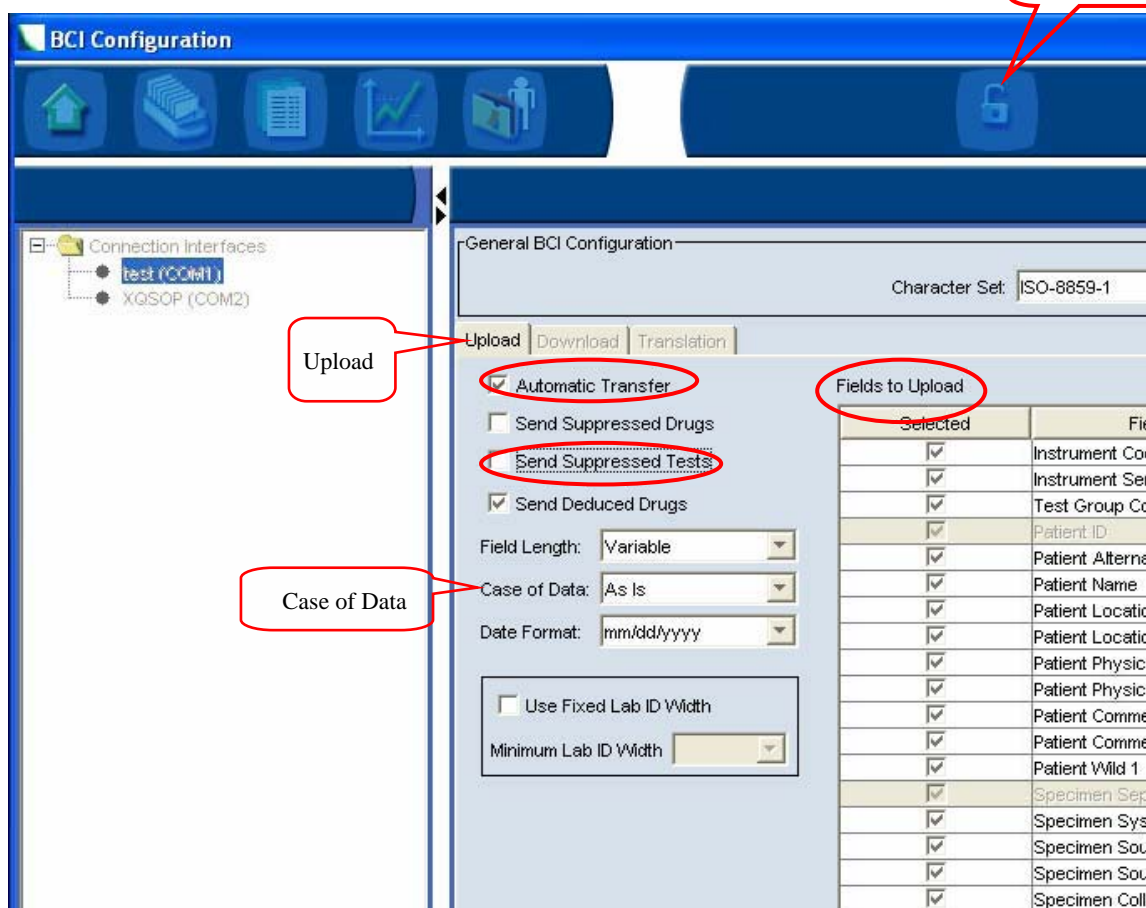

- 在 Upload 附属选项中：必须开启 **Automatic Transfer, Send Deduced Drugs** 这两项。
 - 在 Field Length 选项中：必须设为 **Variable**
 - 在 Case of Data 选项中：必须设为 **As is**
 - 在 Date Format 选项中：可根据用户需要进行设置，如可改为 **yyyy/mm/dd**
 - 在右侧的 Field to Upload 中，请按照默认设置开启全部选项。
- 保存更改。